


K-123Miniサイドレール

取扱説明書

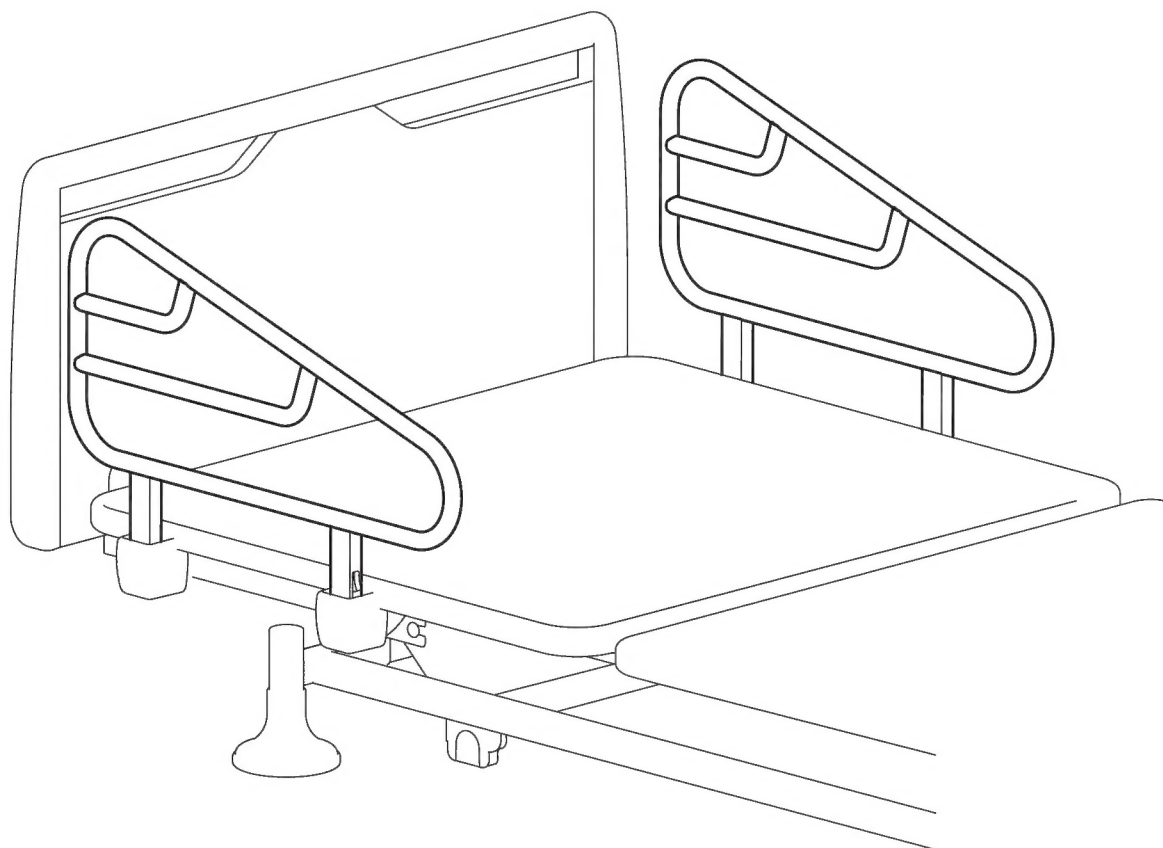

※K-123Miniサイドレールは2本1組です。

このたびは、K-123 Miniサイドレールをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書には、K-123 Miniサイドレールを安全にお使いいただくための注意事項、ベッドへの取り付け方や使用方法などを記入しています。

- K-123Miniサイドレールをお使いになる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。
- K-123Miniサイドレールをご使用になられる方だけでなく、介護する方もこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書はお読みになったあとも、いつでも見られる場所に保管してください。

販売業者の方へのお願い

この取扱説明書は、必ず療養される方が介護される方へお渡しください。

シーホネン株式会社

安全にお使いいただくために

●必ずお読みください

必ずご使用前に『安全にお使いいただくために』をよくお読みになり正しくお使いください。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、損害を未然に防止するためのものです。

説明書の内容を無視し、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を下の表示（絵表示と用語）で区分し、説明しています。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が生命にかかわるケガ、もしくは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●使用について




- 本製品は弊社製品の『CORE - 850R / 880Rシリーズ』専用のサイドレールです。他社のベッドには絶対に使用しないでください。
- 本製品に付属品以外の部品を使ったり、改造をしないでください。
- 本製品を持ってベッドの移動は絶対にしないでください。
- ベッドの背上げ膝上げ動作時、「K-123 Miniサイドレール」本体に身体や手足を差し入れないでください。周辺の介護用品などに挟り大変危険です。



- 幼児や小さいお子様を本製品で遊ばさないでください。
- 本製品に腰掛けたり、極端な荷重をかけないでください。
- サイドテーブルをご使用の場合は、ベッドから必ず離してベッドの各操作を行ってください。

ベッドへの取り付け位置

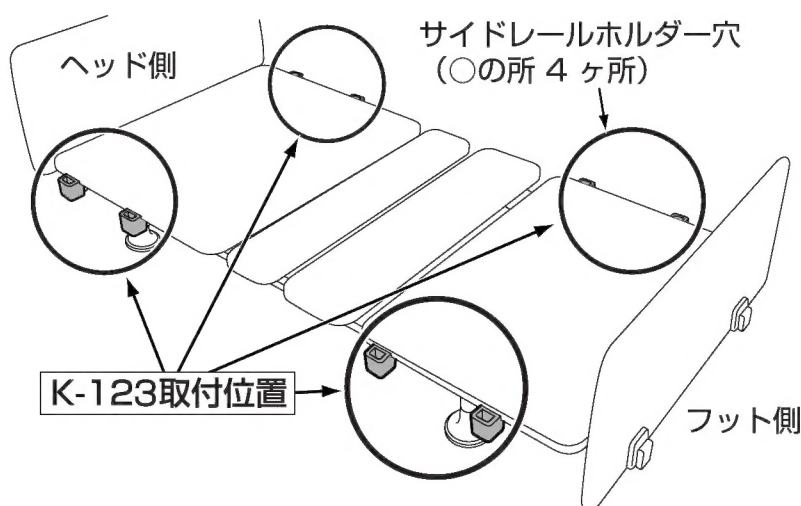


- K-123 Miniサイドレールは左図のサイドレールホルダー穴に取り付けてください。
- K-123 Miniサイドレールは2本1組で、ベッド1台に4本まで使用できます。



左図以外の位置に取り付けないでください。事故や破損の原因になります。

ベッドへの取り付け方

- サイドレール上部を持ち、ホルダー穴に「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

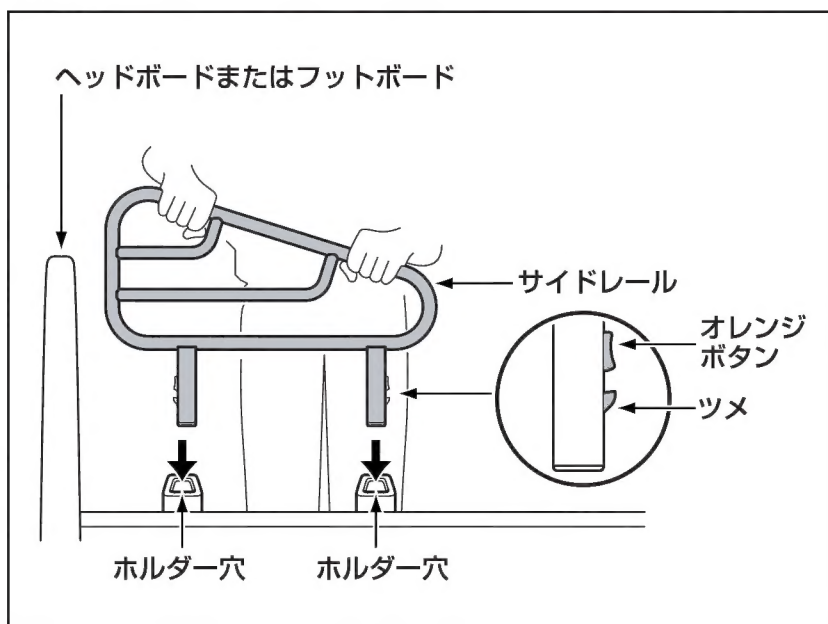


警告

取り付けるとき、オレンジボタンを持って差し込むと、指を挟むことがあります。必ず図のようにサイドレールの上部を、両手でしっかり持って差し込んでください。

ベッドへの取り外し方

- サイドレールのオレンジボタン（左右 2 か所）を指で押しながら、両手でしっかりつかんで引き抜いてください。

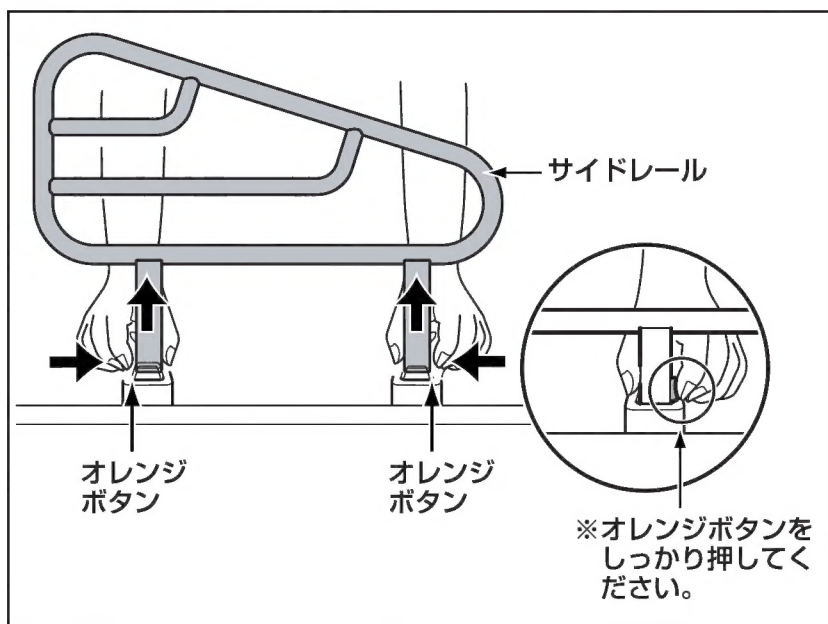

注意

取り外すとき、オレンジボタンを押さずに引き抜こうとすると、サイドレールやベッドが壊れる恐れがありますので、絶対にしないでください。

お手入れの仕方



注意

必ず水で薄めた中性洗剤を使用してください。

揮発性のシンナー、ベンジン、アセトン、アルコールなどは、絶対に使用しないでください。本体が変色したり、塗装が剥げたりします。

- ふき掃除をする場合は、柔らかい布などを使用し、水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞って行ってください。
- その後、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

修理・お取り扱いお手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店、
レンタル取次店へお申し付けください。

【カスタマーサポートお問い合わせ窓口】

無 料 ツーワ

FreeCall 0120-20-1001

10月1日は福祉用具の日



シーホネンス株式会社 ケプロコア営業部

〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目10番17号 TEL (06) 6981-3432

© 2005 SEAHONENCE INC. (シーホネンス株式会社) All Rights Reserved.